

twist 2x2



# DER T4 - 2x2

## DEIN WENDIGES MULTITALENT



# DER T4 2x2

## FASZINATION "MULTITALENT"

**Der T4, das Nachfolgemodell des bewährten TT2, ist ein wahres Multitalent.**

Die überzeugende Eigenschaft:  
**ZENTRALANTRIEB**

Das Drehen um die eigene Achse unterstützt Dich bei engen Manövern. Garantiert Dir ein stabiles und komfortables Fahren.

Dank der neuen LED Scheinwerfer fährst Du auch Nachts sicher auf den Strassen.



Max Wendekreis: 1400 mm




### STEUERUNG

Die R-Net Steuerung ist mit oder ohne LCD-Display erhältlich. Mit dem praktischen LCD-Bildschirm behältst Du bei Tag, wie auch bei Nacht den Überblick der Funktionen.

### STABILES & WENDIGES FAHREN

Dank Zetralantrieb bleibt der Wendekreis bei 1400mm. Auch Hindernisse bis 8 cm, sind dank der H-Flexgabel kein Problem. Der flexible Aufbau absorbiert hierbei die wirkenden Kräfte.

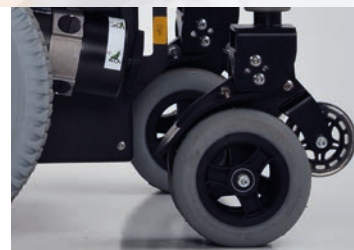


### SITZKANTELUNG & HUBFUNKTION

Maximaler Komfort dank elektrisch verstellbaren Sitz. Ohne Hilfe überblickst Du mit der Hubfunktion Hindernisse oder bringst den Sitz durch die Sitzkantelung in eine erholsame Position.

### LED-BELEUCHTUNG

Die neue LED Beleuchtung sieht nicht nur modern aus. Sie sorgt auch für gut ausgeleuchtete Wege. Die Hecklichter und seitlichen Reflektoren sorgen dafür, dass Du in der Dunkelheit besser von den anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wirst.

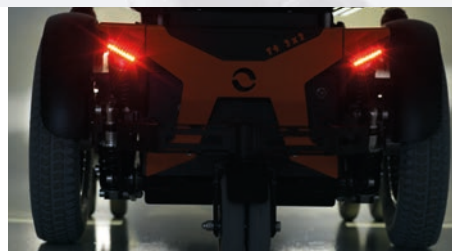



### DER TURBO-TWIST T4 2x2

1. Abdeckung gemäss RAL Katalog
2. Strassenprofil 14" mit Alu Felge
3. LED-Beleuchtung inkl. Blinker
4. Antriebsmotor mit Drehentrigelung

5. Sitzlift 300mm Hub, mit Sitzkantelung
6. Schwenkräder 150 – 180 – 200 mm
7. Geteilte und abnehmbare Beinstützen, parallel und abduziert

Eine Übersicht aller Spezialausrüstungen findest Du unter [www.turbo-twist.ch](http://www.turbo-twist.ch)



## TECHNISCHE ANGABEN

 <p><b>MOTORLEISTUNG</b> Antriebe mit je 350 W Leistung pro Rad.</p>	 <p><b>NEIGUNG / STEIGUNG</b> Sichere Neigung 6° Max. Steigfähigkeit: 17%</p>
 <p><b>RÄDER</b> Alljahresbereifung. Geeignet zur Überwindung von Hindernissen bis 8 cm.</p>	 <p><b>LACKIERUNGEN</b> Alle RAL-Lackierungen gemäss Farbkatalog Degonda</p>
 <p><b>FEDERUNG</b> Einstellbare Federung.</p>	 <p><b>GEWICHTSANGABEN</b> Max. Leergewicht: 160 kg Max. Benutzergewicht: 140 kg Max. Gesamtgewicht: 300 kg</p>
 <p><b>GESCHWINDIGKEIT</b> 10km/h oder 15km/h</p>	<p><b>MASSE</b></p>  <p>630 mm (andere auf Anfrage)</p> <p>1200 mm</p> <p>910 mm</p> <p>1160 mm (mit Beinstützen)</p>
 <p><b>REICHWEITE</b> Je nach Batterie bis zu 35 km. (Geländeabhängig)</p>	
 <p><b>SITZEINHEIT</b> Sitztiefe: 34 - 54 cm Sitzhöhe: 42 + 45 cm (optional) Sitzbreite: 32 - 59 cm</p>	
  <p><b>GEPRÜFTE SICHERHEIT</b> Mit der T4-Baureihe bist Du sicher unterwegs.</p>	